

Sterile Einweg-Lanzetten

zur effektiven und komfortablen Entnahme von Kapillarblutproben

Praktisch schmerzlos

Die elektrisch polierte Nadelspitze mit hochpräzisem dreifach Facettenschliff garantiert eine extrem scharfe Spitze mit besonders glatter Oberfläche. Sie ermöglicht bei der Blutentnahme einen optimalen Blutfluss und maximalem Komfort.



mylife™-Lanzetten

(150-fache Vergrößerung)




Lanzetten
anderer Hersteller

(150-fache Vergrößerung)

Freie Nadellänge

Die Nadel ist perfekt positioniert, um eine konsistente Nadellänge sicherzustellen.

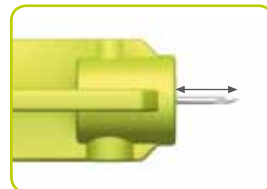

Optimale Sicherheit

Nach dem Entfernen der Lanzettenkappe bleiben keine Kunststoffrückstände (LDPE = Polyethylen niedriger Dichte) an der Nadelspitze zurück.

Geeignet zur Verwendung mit mylife™ Softlance und den meisten anderen Lanzettengeräten

Sichere Entsorgung nach der Verwendung



1. mylife™ Softlance-Lanzettengerät und mylife™ Lancets multicolor nach der Verwendung.



2. Zur Vermeidung von Stichverletzungen wird die Lanzette einfach in die Kappe gesteckt.



3. Hygienisches und sicheres Auswerfen der Lanzette ohne Berühren.



mylife™ Lancets – das hochwertige Sortiment

ideal für Erwachsene und Kinder

mylife™ Lancets

Hochwertige Lanzetten für den täglichen Gebrauch, die einen optimalen Blutfluss garantieren. Spezialdesign zur einfachen und komfortablen Blutentnahme.



mylife™ Lancets multicolor

Hochwertige Lanzetten mit zusätzlicher Schutzkappe zur besonders sicheren Entsorgung. Ideal für Kinder. Packungen enthalten sieben verschiedene Farben und sorgen so für Abwechslung bei der Blutentnahme.



Sterilität bleibt 5 Jahre lang erhalten

Sterilisierende Dosis gemäß ISO 13409

Beschreibung	PZN	Best.-Nr.	Menge	Gauge	Nadeldurchmesser	Nadellänge
mylife™ Lancets	6586432	7100335	200 Stk.	30G	0.298 ~ 0.320 mm	3.3 +/- 0.25 mm
mylife™ Lancets multicolor	8456722	7100336	200 Stk.	30G	0.298 ~ 0.320 mm	3.3 +/- 0.25 mm